

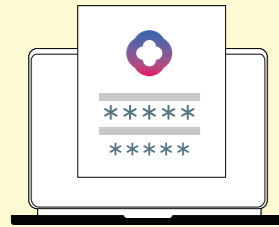


WIE SIE IHRE STUHLPROBE SAMMELN [DE] / HOW TO COLLECT YOUR STOOL SAMPLE [EN] / HOE KUN JE JOUW SAMPLE VERZAMELEN [NL]

1

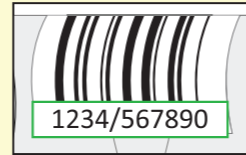

- NL BELANGRIJK:** Activeer uw testkit op www.homediq.com/activeer anders kan het laboratorium uw testmonster niet verwerken.
- EN IMPORTANT:** Activate your test kit at www.homediq.com/activate otherwise the lab will not be able to process your test sample.
- DE WICHTIG:** Aktivieren Sie Ihr Testkit unter www.homediq.com/aktivieren andernfalls kann das Labor Ihre Testprobe nicht verarbeiten.

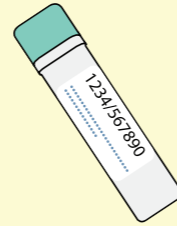

- NL** Om uw test te activeren, moet u de 12-cijferige 'unieke testkit ID-code' gebruiken. U vindt de code op de barcodesticker. Houd er rekening mee dat als uw test 2 buisjes bevat, het laatste nummer van de testcodes een 1 of een 2 is. U hoeft er maar één van beide codes te activeren.
- EN** To activate your test you must use the 12 digit 'unique test kit ID code'. You will find the code on the barcode sticker. Please be notified that in case your test includes 2 test tubes the final number of the test codes include a 1 or a 2, you only need to activate one of both codes.
- DE** Um Ihren Test zu aktivieren, müssen Sie den 12-stelligen 'eindeutigen Testkit-ID-Code' verwenden. Den Code finden Sie auf dem Barcode-Aufkleber. Bitte beachten Sie, dass für den Fall, dass Ihr Test 2 Reagenzgläser enthält, die endgültige Anzahl der Testcodes eine 1 oder eine 2 enthält.

2




- NL LET OP:** Voer deze test niet uit als je last hebt van bloedende aambeien, menstruert of je je niet goed voelt. Voer deze test alleen uit zodra alle bovenstaande symptomen zijn verdwenen.
- EN PLEASE NOTE:** Do not perform this test if you have bleeding hemorrhoids, are menstruating, or are feeling unwell. Conduct this test only when symptoms have subsided.
- DE BITTE BEACHTEN SIE:** Führen Sie diesen Test nicht durch, wenn Sie blutende Hämorrhoiden haben, menstruieren oder sich unwohl fühlen. Führen Sie diesen Test erst durch, wenn die Symptome abgeklungen sind.

- NL** Voer deze test niet uit als je last hebt van bloedende aambeien, menstruert of je je niet goed voelt. Voer deze test alleen uit zodra alle bovenstaande symptomen zijn verdwenen.
- EN** Do not perform this test if you have bleeding hemorrhoids, are menstruating, or are feeling unwell. Conduct this test only when symptoms have subsided.
- DE** Führen Sie diesen Test nicht durch, wenn Sie blutende Hämorrhoiden haben, menstruieren oder sich unwohl fühlen. Führen Sie diesen Test erst durch, wenn die Symptome abgeklungen sind.

- NL** Voeg geen water of andere vloeistof toe aan de FIT verzamelbuis.
- EN** Do not add water into the collection tube.
- DE** Geben Sie kein Wasser in das Sammelröhrchen.



- NL** Plassen en doorspoelen. Laat geen water of urine in contact komen met de ontlasting.
- EN** Pee and Flush. Do not let water or urine come into contact with the stool specimen.
- DE** Pinkeln und spülen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder Urin mit der Stuhlprobe in Kontakt kommt.

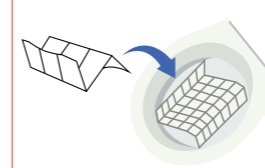


- NL** Vouw het vel papier open en leg dit op het water in het toilet.
- EN** Unfold the paper sheet and place it on top of the water in your toilet.
- DE** Falten Sie den Papierbogen auf und legen Sie ihn auf das Wasser in Ihrer Toilette.


3



- NL** Verzamel je ontlasting op het vel papier. De ontlasting mag niet in contact komen met water of urine.
- EN** Collect your stool on the paper sheet. The stool must not come into contact with water or urine.
- DE** Sammeln Sie Ihren Stuhlgang auf dem Papierbogen. Der Stuhl darf nicht mit Wasser oder Urin in Berührung kommen.

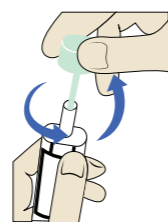


- NL** Draai de groene dop van de FIT verzamelbuis open.
- EN** Twist the green cap to open the sample tube.
- DE** Drehen Sie die grüne Kappe, um das Probenröhrchen zu öffnen.

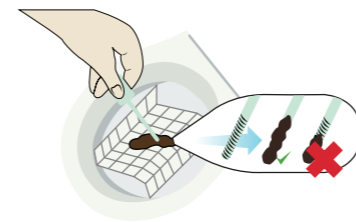


- NL** Verzamel je poepsample door het groene teststaafje goed over de ontlasting te schrapen totdat alle groeven voldoende bedekt zijn.
- EN** Collect sample by scraping the green test stick along the stool until all grooves are covered.
- DE** Sammeln Sie die Probe, indem Sie mit dem grünen Teststäbchen über den Stuhl streichen, bis alle Rillen bedeckt sind.


4

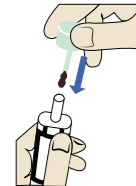

- NL** Plaats het teststaafje terug in de verzamelbuis en draai de groene dop totdat je een duidelijke klik hoort. Was vervolgens goed je handen.
- EN** Put the sample stick back in the collection tube and twist the green cap until it clicks closed. Wash your hands after use.
- DE** Stecken Sie das Teststäbchen zurück in das Sammelröhrchen und drehen Sie die grüne Kappe, bis sie einrastet. Waschen Sie sich nach dem Gebrauch die Hände.

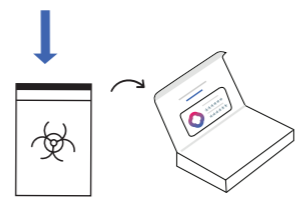

- NL** Plaats de FIT verzamelset in de beschermzak en plaats deze vervolgens in de Homed-IQ test kit box en stop deze in de retourenvelop.
- EN** Put the capped sample collection tube into the biohazard bag and insert the back into the Homed-IQ box. Now close and seal the box.
- DE** Stecken Sie das verschlossene Probenentnahmeröhrchen in den Beutel für Biomaterialien und legen Sie die Rückseite in die Homed-IQ-Box. Schließen und versiegeln Sie nun die Box.

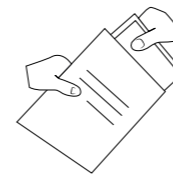

- NL** Stuur de test vervolgens naar het laboratorium
- EN** Send the test to the laboratory immediately using the shipping carrier listed on your prepaid return label.
- DE** Schicken Sie den Test sofort an das Labor, indem Sie das auf dem vorausbezahlten Rücksendetikett angegebene Transportunternehmen benutzen.

! CHECKLIST [NL] / CHECKLIST [EN] / CHECKLISTE [DE]

- NL** Zorg ervoor dat u uw test online activeert op www.homediq.com/activeer. Als u uw testkit niet heeft geactiveerd kan het laboratorium uw testgegevens helaas niet verwerken.
 - EN** Make sure to activate your test online at www.homediq.com/activate. If you don't have your test kit activated, the laboratory cannot process your test.
 - DE** Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Test online unter www.homediq.com/aktivieren. Wenn Sie Ihr Testkit nicht aktiviert haben, kann das Labor Ihre Testdaten leider nicht verarbeiten.
- NL** Zorg dat u de stapsgewijze instructies in deze handleiding volgt.
 - EN** Be sure to follow the step-by-step instructions in this manual.
 - DE** Befolgen Sie unbedingt die Schritt-für-Schritt-Anleitungen im Handbuch.
- NL** Plaats de afgesloten buis in het meegeleverde plastic zakje en sluit het zakje met behulp van de plastic plakrand. Plaats deze vervolgens in de doos en retourneer per retourenvelop naar het laboratorium.
 - EN** Place the sealed collection tube in the supplied plastic pouch and close the bag using the plastic adhesive edge. Place this in the box and return by return envelope to the lab.
 - DE** Legen Sie das versiegelte Röhrchen in den mitgelieferten Plastikbeutel und verschließen Sie den Beutel mit dem Plastikkleberand. Legen Sie es dann in den Karton und senden Sie es in einem Rückumschlag an das Labor zurück.
- NL** Zodra u het testmateriaal heeft afgenomen, dient u de testkit onmiddellijk op te sturen naar het adres op de retourenvelop. Indien de buitentemperatuur boven de 25°C is, verzoeken wij u het pakketje af te geven bij een postkantoor.
 - EN** Once you have collected the test material, you should immediately send the test kit to the address on the return envelope. If the temperature outside is above 25°C, we ask you to drop off the package at a postal drop-off point.
 - DE** Nachdem Sie das Testmaterial gesammelt haben, sollten Sie das Testkit sofort an die Adresse auf dem Rückumschlag senden. Wenn die Außentemperatur über 25°C liegt, bitten wir Sie, das Paket an einer Postfiliale abzugeben.

VOLGENDE STAP [NL] / NEXT STEPS [EN] / NÄCHSTER SCHRITT [DE]



Zodra het laboratorium uw testmonster heeft ontvangen zullen ze deze verwerken. [NL]

Once the laboratory has received your test sample, they will process it. [EN]

Sobald das Labor Ihr Testmuster erhalten hat, wird es bearbeitet. [DE]



Uw testresultaten worden beoordeeld door ons medisch team. [NL]

Your test results will be reviewed by our medical team. [EN]

Ihre Testergebnisse werden von unserem medizinischen Team überprüft. [DE]



We nemen onmiddellijk contact met u op zodra uw testresultaten gereed zijn. [NL]

We will contact you immediately once your test results are ready. [EN]

Wir werden uns umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen, sobald Ihre Testergebnisse vorliegen. [DE]




VRAGEN? [NL] / QUESTIONS? [EN] / FRAGEN? [DE]

homediq.com/faq

support@homediq.com



INSTRUCTIES VOOR HET VERZAMELEN VAN EEN POEPSAMPLE: [NL]
STOOL SAMPLE COLLECTION INSTRUCTIONS: [EN]
ANLEITUNG ZUR ENTNAHME VON STUHLPROBEN: [DE]

Voor jou ligt Homed-IQ's preventieve darmkanker thuistest. Deze test helpt bij het vroegtijdig opsporen van darmkanker. Hoe eerder darmkanker wordt gevonden, hoe succesvoller de kans het is om te behandelen. Deze handleiding bevat de instructies die nodig zijn om deze test succesvol af te kunnen nemen. [NL]

This is your test kit for Homed-IQ's Colon Cancer Screening Test. Taking the sample for this test only takes a few minutes. This test helps to detect colon cancer early. The earlier colon cancer is found, the easier it is to treat. This manual contains the instructions needed to successfully complete your test. [EN]

Dies ist ihr Testkit für den Darmkrebs-Früherkennungstest von Homed-IQ. Die Entnahme der Probe für diesen Test dauert nur ein paar Minuten. Dieser Test hilft bei der Früherkennung von Darmkrebs. Je früher Darmkrebs entdeckt wird, desto leichter ist er zu behandeln. Dieses Handbuch enthält die Anweisungen, die Sie für die erfolgreiche Durchführung Ihres Tests benötigen. [DE]



Activer de test op www.homediq.com/activeren [NL]
Before beginning, activate your test-kit at homediq.com/activate [EN]
Bevor Sie beginnen, aktivieren Sie Ihr Test-Kit unter homediq.com/activate [DE]

Jouw test wordt pas verwerkt door het laboratorium als deze succesvol is geactiveerd. [NL]
Your sample will not be processed unless it is activated. [EN]
Ihre Probe wird nicht verarbeitet, wenn sie nicht aktiviert ist. [DE]

For Terms and Conditions for the NHS Blood and Transplant Convalescent Plasma clinical trial, please click here.

Terms & Conditions - Homed-IQ Europe B.V.

pending or cancelled. It is your responsibility to resolve any issue we encounter in order to place your order. Please note that it is your responsibility to ensure that you have chosen the method and that you authorize us for our third-party payment processor(s) to charge your order. The payment method for the full amount of your order.

5. THE DELIVERY PROCESS
5.1. We aim to ship the product to the delivery address provided to us within a maximum of seven working days after the order confirmation. If the delivery address changes after we send you the order confirmation, the product will be delivered to the original address.
5.2. The delivery dates consist of: (i) the delivery date of the product; (ii) date for providing the test information; (iii) the date for receiving the test results. The delivery dates are approximate Homed-IQ estimates for delivery of the product, not a guarantee of delivery. Incomplete or missing information may result in non-compliance with the planned delivery dates or for reporting to the relevant authorities.
5.3. Product-related risks pass to you once the product has been delivered to the delivery address stated in the order confirmation.
5.4. Please email within 7 days of receiving the delivered product(s) if you have received any live/damaged products or possibly missing items. You can contact info@homediq.com and include at least the following information in your email: the order confirmation number, the Homed-IQ unique activation code and the order ID of the missing or defective product(s).
5.5. We will contact you as soon as possible and send you the product if it is damaged or defective or if certain items are missing from the Homed-IQ test kit otherwise we cannot send you a replacement.

6. CANCELLATION
6.1. You may cancel your order at any time up to 14 days from the day you receive the product to cancel the contract without giving any reason. The cancellation right expires after 14 days.
6.2. Notify us within the accepted time frame of your decision to cancel by mail or email at info@homediq.com. You must then return the product to us within a maximum of 14 days of receipt of the product. We reimburse you with the same payment method you used for the first payment unless you have used a different method. The return of the product will be charged as a result of such reimbursement. As mentioned earlier, the costs of returning the product will be at your own expense.
7. OUR SERVICES
7.1. In case you receive the product by mail or purchase the product in-store from one of the pharmacies and/or retailers, you do not need to register the test. If you do not link it to your personal account, you do not need to register the test. You will not have access to the test information, the test results, the test reactive or detected test, can be free of infectious disease. Any positive, reactive, or definitive diagnosis through a confirmed physician through a confirmation of test.
7.2. Any breach of your obligations as described in the Terms and Conditions may constitute a breach of contract and you may be liable for damages and/or compensation. By using our year 1 product, you warrant and confirm that you are legally able to enter into binding contracts and that you are at least 18 years old.
7.3. All products and follow-up tests performed by a medical professional are required to form a definitive diagnosis.
7.4. The incubation period is the period from exposure to the person's body. Different viruses and infections have different incubation times and can take several months to be detected. You should be aware of this and use the test before the relevant incubation period has completely expired (the incubation period is not developed; or 3) if you may have been exposed to any other infection in the meantime.
7.5. You undertake and agree: steps in the supplied instructions for use that are included with the product; to return the sample within the timeframe set out in the product; and to provide us, when requested, with the information or proof of identity that we may require from you to correct or delete any information and to ensure that it is accurate and that you have given your consent to use the website, products and services only for the purposes for which they were intended and that is outlined within the Terms and Conditions. In addition, you further agree not to make a complaint or ask any questions regarding these Terms and Conditions, not to offend or frighten any of our employees or our employees. You also agree not to use the products and/or services for resale or in any way that violates our intellectual property rights or other applicable laws and regulations. You acknowledge and agree that when you place an order for the services through this website including purchasing one or more products through this website, you agree to be bound by the Terms and Conditions and to accept any advice from us.

8. SUBMISSION OF THE TEST SAMPLE
8.1. Please note that when submitting a sample, you must fill the test tube to the indicated level. If you do not provide enough test material, the laboratory cannot process your sample which means you will not receive a test result in the user manual. Please read this carefully in the user manual. Please read this carefully to make sure you complete the steps of the test. If you do not complete the steps, we will not be able to process the test. You then place the test sample, after collection, in a prepaid envelope and you must immediately (read: immediately after collection) return it to the laboratory. Do not use other containers or other methods of transport. Do not use any other containers or other methods of transport. Do not use any other containers or other methods of transport.
9. SETTING UP YOUR ACCOUNT
9.1. To obtain test results that we have created on an account on the website and activated the test using the unique ID, code stated on the product.
9.2. The user agrees to create only one account with us through the website and not to duplicate a user account. When you create an account, we will ask for your personal information and the correct contact information and to answer the questionnaire carefully as it will be used to support our medical team.
9.3. To create an account, go to 'login' at the top of the menu on the homepage of the website.

10. TEST ACTIVATION
10.1. All tests must be activated by the customer before use. Failure to activate one's test may result in Homed-IQ being unable to process a test result.
10.2. The customer is responsible for reading all test instructions and ensuring their test is correctly activated. Homed-IQ is not liable to reimburse customers for incorrectly activated tests.
11. TEST INFORMATION
11.1. You will receive an email notification when the test results have been made available when the account. The test results are written in plain text and you can access the test results and the outcome of the test. You may receive a notification of non-reactive, please refer to section 18 of the Terms and Conditions and the activation times.
11.2. A confirmatory test from a qualified physician is necessary if you have received a positive result. With regard to user health test information indicates a positive, reactive, detected or increased result, our services includes a written report and you will be contacted by our support team in addition to this explanation, we do advise the user to contact his or her doctor.
11.3. If you purchase products and services and receive test information within an incubation period, you will need to wait for the test results or through your doctor, if you are concerned or have any other questions, you should consult your own physician.
12. DISCLAIMERS AND EXCLUSION OF LIABILITY
12.1. We, our affiliates and their respective directors, employees and suppliers, make no warranties or representations about the content (including user content) of the Homed-IQ website, products and services, including but not limited to its accuracy, completeness or reliability. We do not warrant the accuracy, completeness or reliability of the information provided by the user.
12.2. You, the consumer, "user", have certain legal rights. The disclaimers, exclusions and limitations of liability under these Terms and Conditions apply to you. Nothing in these Terms and Conditions will attempt to exclude or limit your liability that cannot be excluded under applicable law.
12.3. The products and services are provided "as is", without any form of warranty. We hereby disclaim all warranties, including, but not limited to, implied warranties of merchantability, non-infringement of third party rights, and fitness for a particular purpose.
12.4. In addition to the above-mentioned warranties, we make no warranty, whether in a written, special or incidental damages, including damages for loss of data, loss of reputation, lost profits, lost business, lost contracts or other losses suffered by a third party, arising out of or in connection with the products and/or services. Homed-IQ Europe B.V. or our affiliates, even if we knew or should have known the possibility of such damage.
12.5. Under no circumstances will the total liability of Homed-IQ Europe B.V. in no way liable or responsible for the amount that you have paid for the products and services, whether in contract or otherwise, exceed 100% of the amount that you have paid for the products and services.
12.6. Homed-IQ Europe B.V. does not accept any liability or commitments set out in the General Terms and Conditions will never read us to be in breach of any provision of these General Terms and Conditions.
12.7. Homed-IQ Europe B.V. is not obliged to provide the services if you have not followed the instructions regarding ordering using the product. Homed-IQ Europe B.V. is not liable for the sample in accordance with these General Terms and Conditions.
12.8. The image of a product on our website may not accurately reflect the actual product. Homed-IQ Europe B.V. is not liable for any discrepancy between the image of a product on our website and the actual product.
12.9. The provisions of this clause will remain in full force and effect upon the expiration of the General Agreement.

13. GENERAL LEGAL PROVISIONS
13.1. Homed-IQ Europe B.V. is in no way liable or responsible for the amount that you have paid for the products and services, whether in contract or otherwise, exceed 100% of the amount that you have paid for the products and services.
13.2. For these General Terms and Conditions, Dutch law applies to the construction, interpretation and in case of any dispute, our website and in case of any dispute, our website and in case of any dispute, our website and in case of any dispute, our website.
13.3. Homed-IQ Europe B.V. is not obliged to provide the services if you have not followed the instructions regarding ordering using the product. Homed-IQ Europe B.V. is not liable for the sample in accordance with these General Terms and Conditions.
13.4. The image of a product on our website may not accurately reflect the actual product. Homed-IQ Europe B.V. is not liable for any discrepancy between the image of a product on our website and the actual product.
13.5. Homed-IQ Europe B.V. is not obliged to provide the services if you have not followed the instructions regarding ordering using the product. Homed-IQ Europe B.V. is not liable for the sample in accordance with these General Terms and Conditions.
13.6. If any part of these Terms and Conditions becomes illegal, invalid, unenforceable, or otherwise unworkable, the provisions of the law or regulation that provides for that part thereof will be deemed not to form part of the contract between us. The legality, validity or enforceability of the remaining provisions of the conditions will remain in full force and effect.

Last modified on August 6, 2023

ONTLASTINGSTEST [NL]
STOOL SAMPLE TEST [EN]
STUHLTEST [DE]

Lees eerst de gebruiksaanwijzing voordat u begint met de testafname [NL]
Read the instruction manual first before you start collecting your sample [EN]
Lesen Sie zuerst die Bedienungsanleitung, bevor Sie mit dem Test beginnen [DE]



Last modified on August 6, 2023